

Przesiewowe badania słuchu dla osób w każdym wieku



touchTymp

Nasza linia impedancyjna ALL-TOUCH

Proste, intuicyjne badanie ucha środkowego

Nasza linia impedancyjna touchTymp została zaprojektowana tak, by zamienić tympanometrię w intuicyjne, wydajne i przyjemne badanie. Usprawnij swoją codzienną pracę dzięki naszemu pełnemu ekranowi dotykowemu 10,4" oraz przyjaznemu interfejsowi, pozwalającemu na łatwą zmianę parametrów.








"Mogę obsługiwać wszystkie funkcje trzema kliknięciami.

touchTymp jest naprawdę niesamowicie intuicyjny"

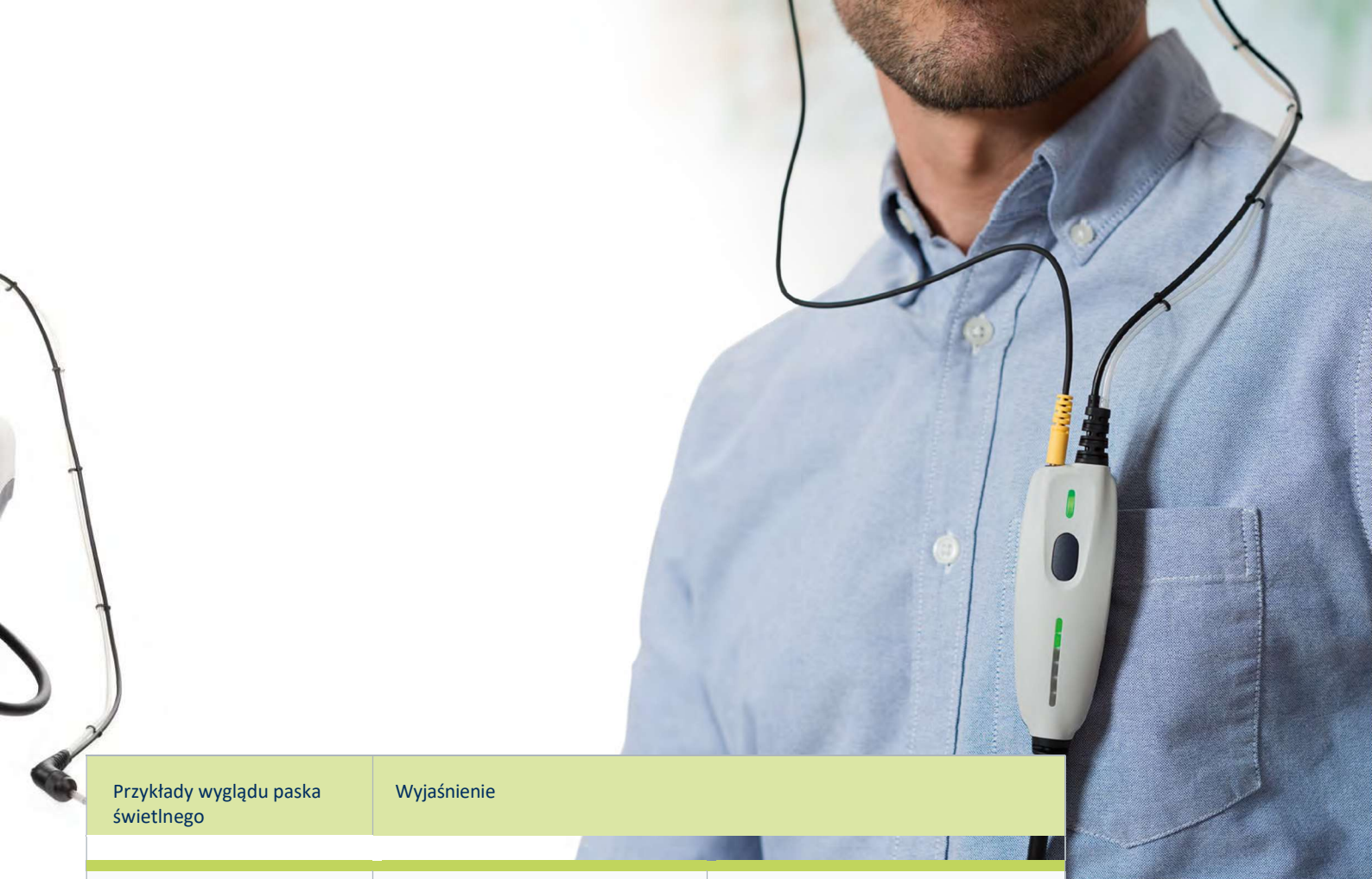Dr Michel Bloch, Cannes, Francja





Przykłady wyglądu paska świetlnego	Wyjaśnienie	
	Tympanometria i odruch akustyczny	Pokazuje rezultat: brak odpowiedzi
	Tympanometria i odruch akustyczny	Pokazuje rezultat: Pass (zaliczony)
	Odruch akustyczny	Bodziec jest podawany (dodatkowo pokazany jest ostatni wynik)
	Tympanometria	Podświetla się i zanika w zależności od wartości (pole normatywne)

Skupienie się na pacjencie

Doświadcz pełnej kontroli nad sondą, koncentrując się wyłącznie na pacjencie: łatwe w obsłudze sondy TouchTymp wyposażone są w unikatowe paski świetlne umożliwiające śledzenie postępu badania w czasie rzeczywistym. Aby idealnie dopasować się do potrzeb badającego, różne wersje TouchTymp wyposażone są w unikatowe sondy. Urządzenia touchTymp MI 24 i touchTymp MI 26 oferują ergonomiczną sondę pen do testów przesiewowych, a touchTymp MI 34 i touchTymp MI 36 wyposażone są w lekką sondę naramienną zarówno do badań przesiewowych, jak i diagnostyki. Można ją łatwo przypiąć do ubrania w górnej części ciała pacjenta, aby ułatwić sobie obsługę sondy.




Audiometr do niewielkich przestrzeni

Nasze touchTymp MI 26 i touchTymp MI 36 łączą intuicyjną tympanometrię i audiometrię w jednym wyjątkowym urządzeniu. Ich niewielkie rozmiary sprawiają, że są idealne do ograniczonej przestrzeni na biurku, a możliwość łatwego i płynnego przełączania się między testami sprawia, że praca z ich pomocą jest znacznie bardziej efektywna i komfortowa.




Wybierz między touchTymp MI 26 do badań ucha środkowego i audiometrią lub touchTymp MI 36 z dodatkowymi możliwościami diagnostycznymi. Oprócz audiometrii przewodnictwa powietrznego, touchTymp MI 36 oferuje także przewodnictwo kostne, które jest opcjonalnie dostępne dla touchTymp MI 26.

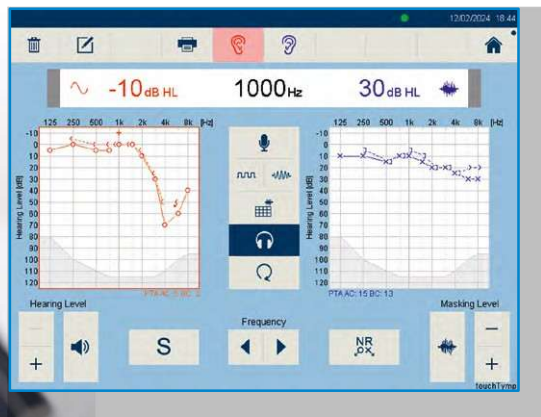

Tympanometria dla dzieci nigdy nie była tak ekscytująca

Ułatwiamy i przyspieszamy badanie, skupiając uwagę dziecka na ekscytującym wyścigu animowanych samochodów przez cały czas trwania badania tympanometrycznego lub badania odruchu. Kolorowa animacja angażuje dziecko, zmniejszając ryzyko pojawienia się braku szczelności między końcówką sondy a uchem i koniecznością powtórzenia badania. Oszczędza to czas i wysiłek, a jednocześnie sprawia, że proces przesiewowy jest przyjemniejszy dla Twojego małego pacjenta!

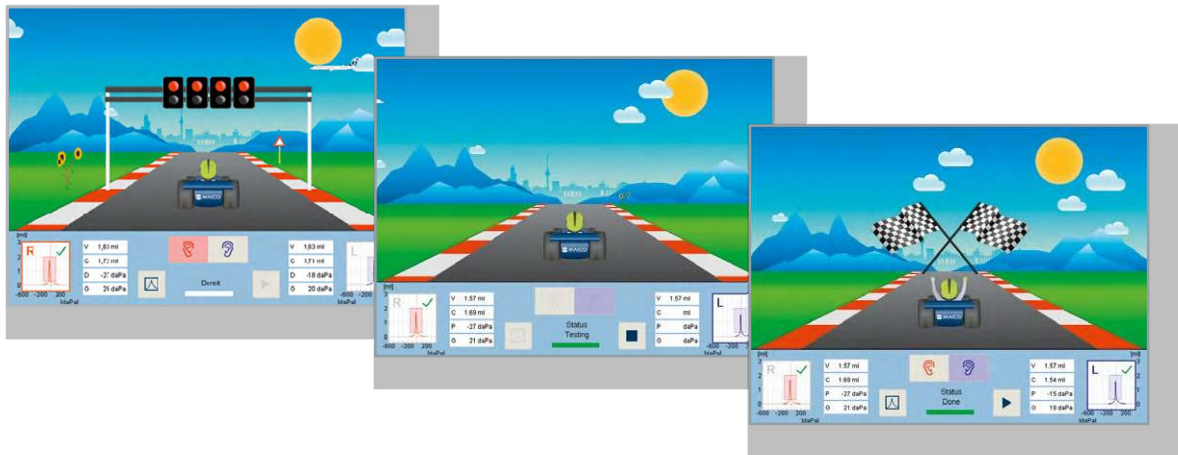

Wyścig samochodowy zaczyna się zaraz po rozpoczęciu testu. Po zakończeniu pomiaru samochód dociera do mety, a pacjent wygrywa wyścig.



Kompleksowe protokoły testowe

Każdy touchTymp zapewnia standardowe kompleksowe protokoły umożliwiające natychmiastowe przeprowadzanie badań przesiewowych i diagnostycznych:

Testy	touchTymp			
	MI 24	MI 26	34 MI	MI 36
Tympanometria				
226 Hz	✓	✓	✓	✓
678 Hz, 800 Hz			✓	✓
1000 Hz	opcjonalny	opcjonalny	opcjonalny	opcjonalny
Animacja RaceCar 	✓	✓	✓	✓
Odruchy akustyczne				
Stałe (Screening)	✓	✓	✓	✓
Automatyczne (próg)	✓	✓	✓	✓
Ipsilateralne	✓	✓	✓	✓
Kontralateralne	opcjonalny	opcjonalny	✓	✓
Czysty ton	✓	✓	✓	✓
Szum			✓	✓
Animacja RaceCar 	✓	✓	✓	✓
Zanikanie odruchu - Decay				
Ipsilateralna / kontralateralna			✓	✓
ETF				
ETF dla błony prawidłowej / z perforacją			✓	✓
Audiometria				
Czysty ton + dźwięk modulowany		✓		✓
Przewodnictwo powietrzne		✓		✓
Przewodnictwo kostne		opcjonalny		✓
Maskowanie		✓		✓



Oprogramowanie Sessions PC

TouchTympt jest w pełni wspierany przez oprogramowanie Sessions, dzięki któremu wyniki badań można przenosić do komputera i tam nimi zarządzać. Sessions automatycznie synchronizuje pomiary naszego touchTympt, zapewniając płynny transfer danych i wyników badań. Dzięki Sessions możesz przeglądać dane, archiwizować je i nimi zarządzać, a także drukować raporty. Przejrzysty interfejs użytkownika oparty na ikonach umożliwia efektywną pracę i szybkie zarządzanie danymi. Możesz połączyć Sessions z bazą danych z pełną kompatybilnością lub uruchomić ją osobno. Alternatywnie, możesz łatwo zintegrować oprogramowanie z wybranym rozwiązaniem EMR/EHR za pomocą interfejsów. Daje to możliwość tworzenia szczegółowych raportów, które można łatwo zarchiwizować lub wydrukować.

Możesz także stworzyć "bezpapierowe" biuro, zapisując wyniki testów w formacie PDF do elektronicznej archiwizacji lub przesyłania ich e-mailem.



Badanie ucha środkowego dla osób w każdym wieku

Nasz touchTympt został zaprojektowany z myślą o potrzebach osób w każdym wieku. Przeprowadzaj badania przesiewowe i diagnostyczne u pacjentów od niemowląt po osoby w starszym wieku.

Łatwy wydruk wyników

Oszczędzaj czas, korzystając z wbudowanej drukarki TouchTympt: wystarczy włożyć sondę do uchwyty, aby natychmiast i automatycznie drukować wyniki badań i raporty.



touchTymp – Komponenty, akcesoria i oprogramowanie




touchTymp MI 24,
touchTymp MI
26 z Pen Probe




touchTymp MI 34,
touchTymp MI 36
z sondą Shoulder
Box



Słuchawki AC
DD65 v2

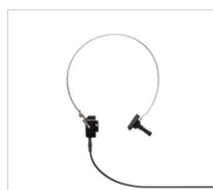

Słuchawki BC B71

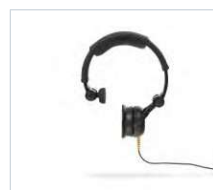

Słuchawka DD45C



Pudełko na końcówki
douszne



Słuchawki AC
DD45



Mikrofon Talk
back do
komunikacji
zwrotnej



Słuchawki
monitorujące z
mikrofonem



Oprogramowanie
Sessions PC

Standardowa konfiguracja może różnić się w zależności od wybranej wersji TouchTymp.

Dostępne

Sanibel™ Supply jest wyłącznym dostawcą jednorazowych produktów MAICO touchTymp. Używaj wyłącznie jednorazowych produktów Sanibel™, aby osiągnąć optymalne wyniki badań.



Obejrzyj
nasze filmy o
touchTymp



MAICO Diagnostics GmbH
Sickingenstr. 70 -71 · 10553 Berlin · Niemcy
tel.: +49 30 / 70 71 46-50
sales@maico.biz · www.maico.biz

Audiofon Matyja Sp. k.
ul. Aliancka 6
53-014 Wrocław
tel.: 71 388 22 80
kom: 885 550 409



handelmaico@audiofon.pl